


HP 二位六通带排气高压旋转阀

规格书

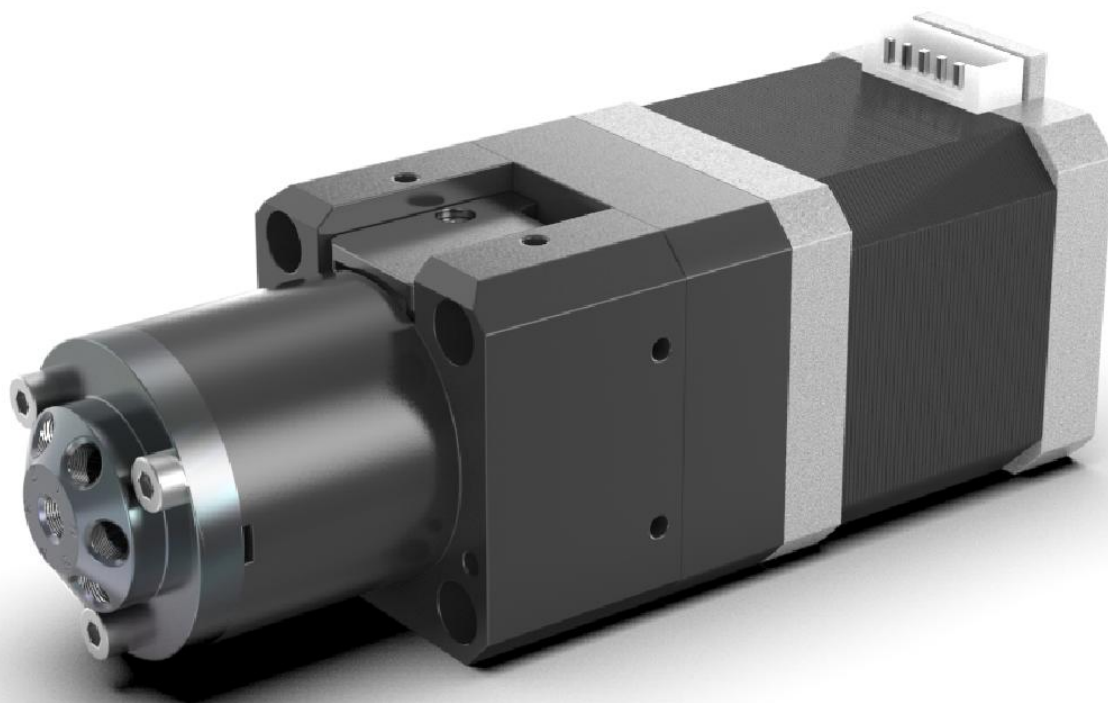

目录

1 产品简述.....	3
2 产品特点.....	3
3 规格参数.....	4
4 功能简介.....	5
5 外形尺寸.....	6
6 接口信息.....	7
6.1 光耦信息.....	7
6.2 电机信息.....	7
7 订购信息.....	8
7.1 商品信息.....	8
7.2 备件信息.....	8

1 产品简述

高压旋转阀（亦称自动进样阀、样本阀）是高效液相色谱（HPLC）系统中实现自动进样的核心部件，凭借高达 25MPa 的耐压能力、0.8 μ L 超小内体积以及独有专利的流路与排气设计，可在高压环境下精确控制流体流向，高效完成系统排气。该阀具有长寿命、免维护的特点，且全面符合 ISO9001、RoHS 及 CE 等质量标准与认证，已广泛应用于医疗、食品、化工等领域的检测与分析流程中。

2 产品特点

- ❖ 部件的设计和制造按照最高质量标准，符合 ISO9001 质量体系标准、欧盟 RoHS 指令和 CE 安全认证，免除仪器监管审批中的后顾之忧。
- ❖ 耐压可到达 25MPa，多个端口可选择，外接定量管或其他管路，适用于多种用途。
- ❖ 阀头使用 SUS316L，阀芯使用高分子材质，化学兼容性好。
- ❖ 0.4mm 微流道设计，大程度减少内体积。
- ❖ 阀芯采用高分子耐磨材料且可快速更替，延长使用周期。
- ❖ 精密加工，结构角度控制精确。
- ❖ 结构紧凑小巧，端口螺纹孔位置设计合理，方便接头安装与拆卸。
- ❖ 独有专利的排气泡设计。

3 规格参数

类别	项目	参数
技术参数	产品型号	HP-26SSU3204
	额定电压	24V
	额定电流	2A
	额定功率	48W
	电机减速比	5:1
应用参数	规格参数	二位六通带排气
	外形尺寸	长×宽×高: 42mm×42mm×123.5mm
	安装尺寸及螺纹参数	定位(长×宽): 19mm×20mm、定形(螺纹规格×螺纹深度): M3×10mm
	接口规格	10-32UNF ①
	最大工作压力	25MPa
	通道直径	0.4mm
	相邻流道切换时间	100ms
	使用寿命	15万cycles(纯水) ②
	工作噪音	<60dB
	内体积	0.8μL
触液材料	定子	SUS316L
	转子	高分子材料
环境要求	环境温度	0 ~ 40℃(无冷凝)
	环境湿度	0-93%±3RH at 40℃(无冷凝)
	储运温度	-40~55℃(无结冰、无冷凝)

注释: 1. 10-32UNF 配合锥形系列接头安装。


2. 寿命数据为恒永达实验室测试数据, 其中由“注液位”切换至“抽样位”切换至“排气位”为一个周期。
(寿命测试介质为纯水, 转子速度为 100 RPM, 其余详细寿命测试相关信息咨询恒永达销售人员。)

Note:


本规格书中提供的信息是基于标称单位的技术数据和测试结果。它被认为是准确可靠的, 并提供了一个辅助, 以帮助选择恒永达产品。用户有责任确定产品是否适合预期用途, 并完成相关试验后使用。

4 功能简介


HP 高压阀通过内部结构切换，可实现以下基本功能：1. 当电机复位、归中^①，光耦处于未遮挡状态时，HP 高压阀 1-2 流道、3-4 流道、5-6 流道相互连通，对应工作位置为“**注液位**”；2. 以复位位置为起始状态，目视阀头端面为主方向，电机顺时针旋转旋转 60° ，光耦处于遮挡状态，HP 高压阀 1-6 流道、2-3 流道、4-5 流道相互连通，对应工作位置为“**抽样位**”；3. 以复位位置为起始状态，目视阀头端面为主方向，电机逆时针旋转旋转 150° ，光耦处于遮挡状态，HP 高压阀 3-7 流道相互连通，对应工作位置为“**排气位**”；

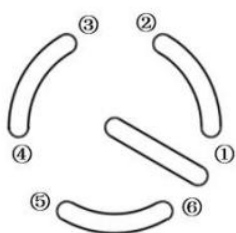



注液位

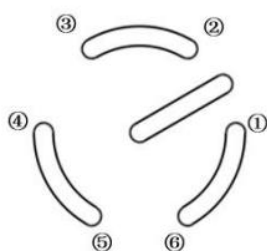

抽样位

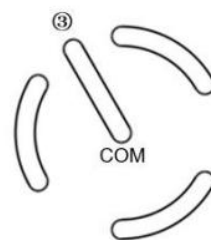


排气位

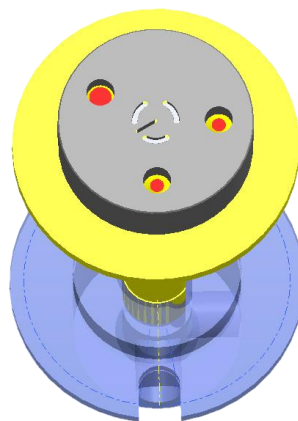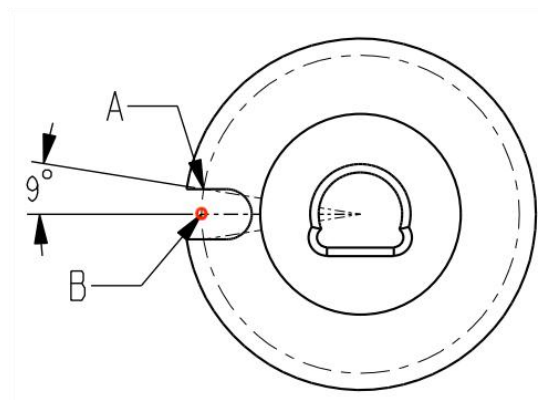

注释：

1. “归中”动作定义为光耦挡片执行“复位”动作旋转至上图 A 位置后，由 A 位置顺时针旋转 9° 移动归中到挡片中间 B 位置。
2. 编号 1~6 流道孔相邻流道孔角度为 60° ，排气位与 1 号孔角度为 30° ，光耦挡片边缘与中心角度为 9° 。
3. 电机减速比为 5:1。

5 外形尺寸

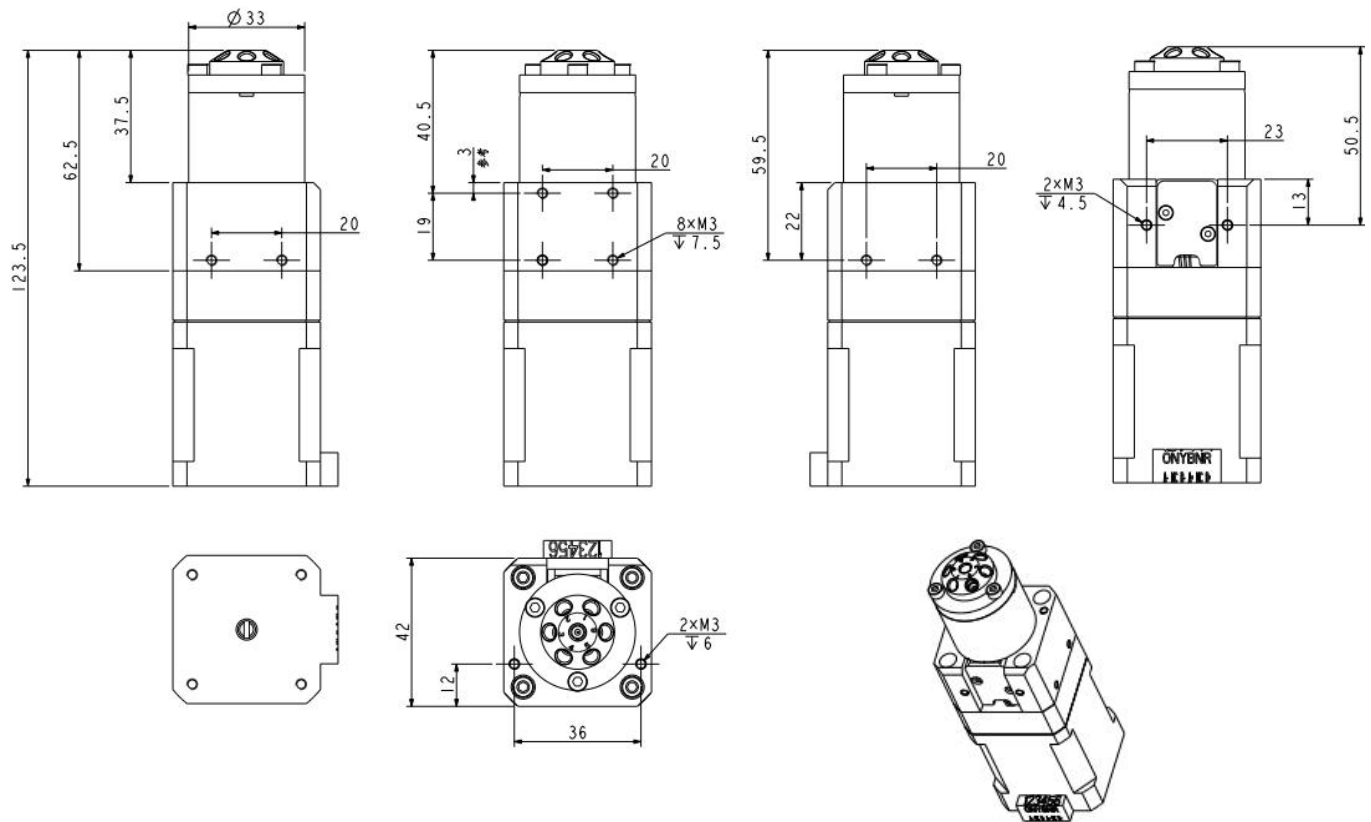



单位默认为 mm。

6 接口信息


6.1 光耦信息

光耦接口规格	
光耦端子	JST SPH-002T-P0.5L
光耦胶壳	JST PHR-4

光耦接口定义		
PIN	颜色	说明
PIN4	黑色	电源负/地
PIN2	白色	信号线
PIN1	红色	电源正
型号	模式	条件
/	低电平	入光

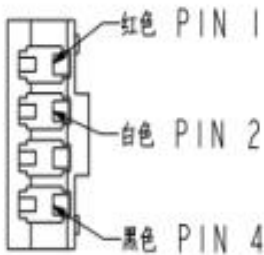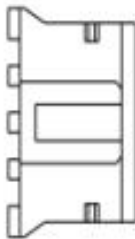

6.2 电机信息

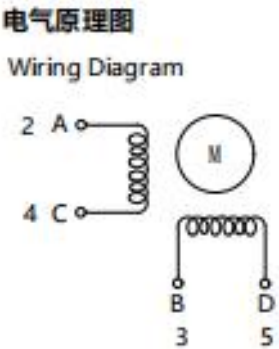

励磁顺序vs.旋转方向
Exciting Sequence vs.
Direction of Rotation

STEP	A	B	C	D
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

从安装面看为顺时针方向
Clockwise view from mounting side

7 订购信息

7.1 商品信息

商品编码	型号
639005	高压阀 HP-26SSU3204 639005

7.2 备件信息

商品编码	型号
639006	HP高压阀阀头部件包
639007	HP高压阀阀芯部件包

Flowchart area with horizontal dotted lines for drawing.